

Referentienummer van jouw product: _____

Jouw notities: _____

Belang van fixeren

Gebruik je de urinezak in combinatie met een verblijfskatheter? Dan is het van belang dat je zowel de katheter als de urinezak goed vastmaakt op je lichaam. Dit helpt beschadigingen aan de urinebuis (urethra) en blaas voorkomen.

Voorkom tractie (trekken) op de verblijfskatheter


- * Fixeer de katheter
- * Gebruik de juiste lengte slang
- * Fixeer de urinezak
- * Houd bij het fixeren rekening met bewegingsvrijheid

Jouw instructies voor het fixeren

Voor meer informatie over het assortiment en de producten kun je terecht op [hekura.nl](https://www.hekura.nl).




HEKURA

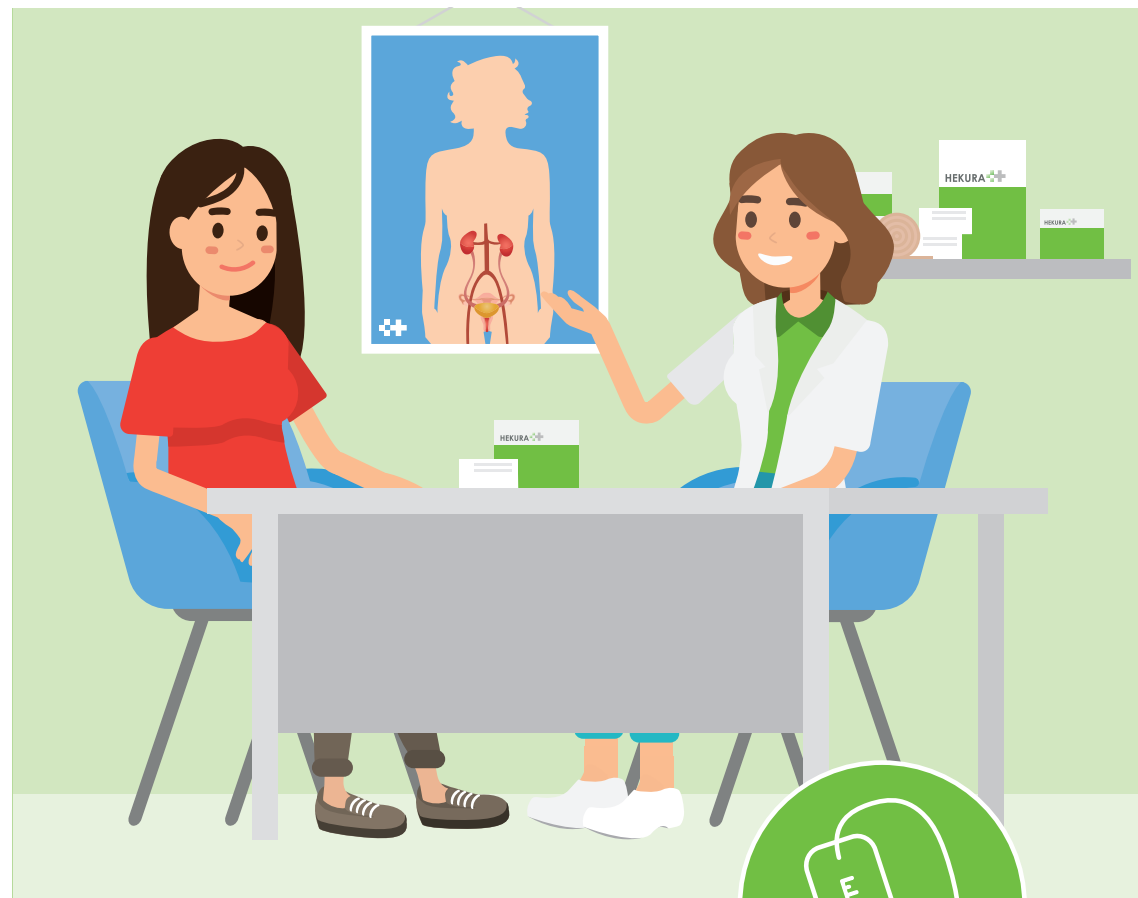

Gebruiksaanwijzing Meerdaagse beenzakken

Het gevoel van Hekura...
Controle. Dichtbij. Samen vooruit.

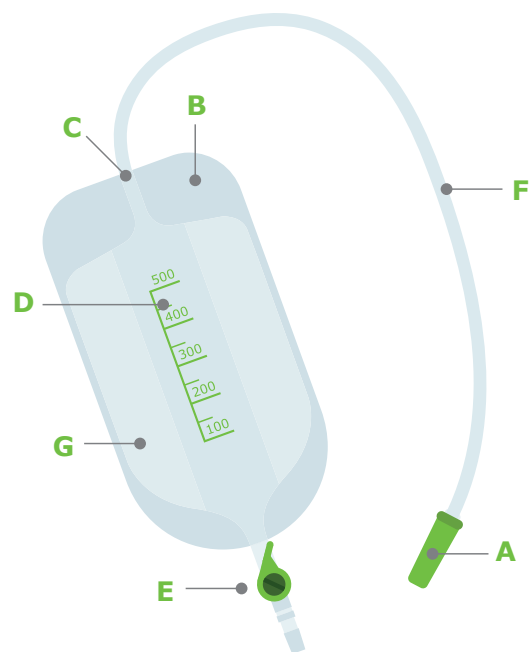

A Universele connector met beschermdop.

De geribbelde connector zorgt voor een sterke verbinding tussen de verblijfskatheter en de urinezak.

B Voorgestante bevestigingsopening.

Maak je gebruik van beenbanden met knopen? Deze maak je hieraan vast.

C Terugslagventiel.

Dit voorkomt dat de urine terug in de slang kan lopen.

D Indicatieve maatverdeling.

Hiermee heb je inzicht in de hoeveelheid urine die je produceert.

E Kraan.


Deze zorgt ervoor dat de urinezak geleegd kan worden. Er zijn verschillende kranen. Meer informatie hierover vind je in de instructie hiernaast.

F Toevoerslang.

Afhankelijk van de urinezak heeft de toevoerslang een lengte van 50 cm of 60 cm. Beide zijn op maat te knippen.

G Drie compartimenten.

De drie compartimenten zorgen dat het geluid gedempt wordt. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de gevulde urinezak platter is en daardoor minder zichtbaar onder de kleding is.

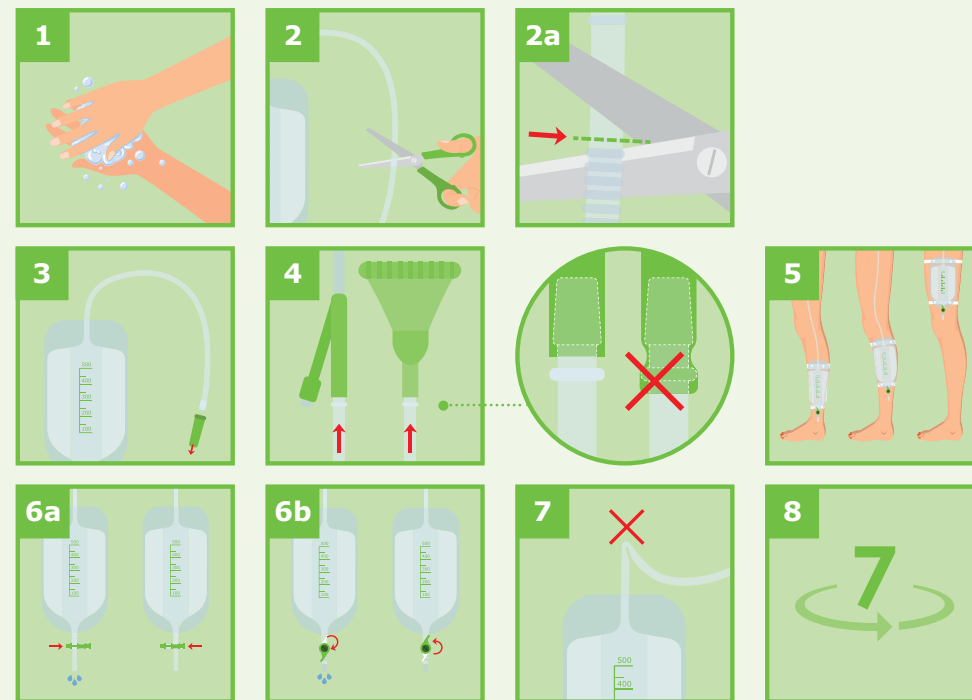

Instructie

- 1 Was je handen zorgvuldig.
- 2 Optioneel: knip de slang op de gewenste lengte en bevestig de connector stevig op de slang van de urinezak.
 - 2a Geribbelde slang: knip in het gladde gedeelte. Laat zoveel mogelijk van het gladde gedeelte zitten om de connector goed te kunnen bevestigen.
- 3 Verwijder de groene beschermhuls van de connector. Zorg dat de kraan gesloten is.
- 4 Koppel de urinezak aan de katheter tot aan de achterste ribbel. Ga hier niet overheen.
- 5 Bevestig de urinezak met fixatiemateriaal op de gewenste plek aan het been.
- 6 Open de kraan om de zak te legen. Reinig na leging het uiteinde van de kraan.
 - 6a Kruiskraan: Schuif de kruiskraan naar de andere kant. Voor het sluiten schuif je de kruiskraan terug totdat er een klik hoorbaar is.
 - 6b Hefboomkraan: klap de hefboomkraan omlaag. Klap de hefboomkraan omhoog om de urinezak te sluiten.
- 7 Zorg altijd voor een knikvrije slang.
- 8 Voor gebruik tot maximaal 7 dagen.



Bekijk de instructievideo op [hekura.nl](https://www.hekura.nl)