



Bijzonder in eenvoud. Compressiezorg is al ingewikkeld genoeg.

HEKA COMPRESSIEBOX uitgebreide set voor ambulante compressietherapie

Inhoud
 2 x 2 stuks Heka Dur tex compressiezwachtel • 5 m x 10 cm
 1 x Heka Fast multistretch buisverband • 5 m x 7,5 cm
 2 x Heka Fast multistretch buisverband • 1 m x 10,75 cm
 2 x Heka Padding synthetische watten • 3 m x 10 cm
 1 x Heka Por silk hechtpleister kunstzijde • 5 m x 2,5 cm
 1 x rolmaat

ref	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI1000-1	1 box	8 x 1 box 15392856

HEKA UNIVERSEEL permanent elastisch steunwindsel

Middellange rek, 63% katoen/36% polyamide/1% polyurethaan, constante elasticiteit, wasbaar. Per stuk verpakt in cellofaan incl. verbandklemmen.
Toepassing: geeft steun en ontlast bij verstuiking/ontwrichting; sportbandage; fixatiewindsel.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0142-1	5 m x 6 cm	10 rol	10 x 10 rol 15456188
	WI0144-1	5 m x 8 cm	10 rol	10 x 10 rol 15456196
	WI0146-1	5 m x 10 cm	10 rol	10 x 10 rol 15456218

HEKA IDEEAL superieur DIN 61 632 stevig rekbaar steunzwachtel

Korte rek (ca. 93%), 100% katoen, ademend, groot absorberend vermogen, wasbaar op 90 °C, steriliseerbaar. Per stuk verpakt in cellofaan.
Toepassing: compressiezwachtel bij vaataandoening of ter preventie daarvan; geeft steun en ontlast bij verstuiking/ontwrichting; sportbandage; sterk fixatiewindsel.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0090	5 m x 4 cm	10 rol	10 x 10 rol 16725875
	WI0092-1	5 m x 6 cm	10 rol	10 x 10 rol 15456129
	WI0094-1	5 m x 8 cm	10 rol	10 x 10 rol 15456137
	WI0096-1	5 m x 10 cm	5 rol	5 x 10 rol 15456145
	WI0098-1	5 m x 12 cm	5 rol	5 x 10 rol 15456153
	WI0099	5 m x 15 cm	10 rol	5 x 10 rol 16725883

HEKA DUR SOFT compressiezwachtel, lichte uitvoering

Compressiewindsel, lange rek (ca. 160%), elastisch, 81% katoen/16% polyamide/3% polyurethaan, wasbaar op 60 °C, latexvrij. Per stuk verpakt in doosje inclusief verbandklemmen.
Toepassing: voor sterke/regelbare compressie.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0166-1	7 m x 10 cm	1 rol	32 x 1 rol 15364747
latex free	WI0168	7 m x 12 cm	1 rol	32 x 1 rol 15364755

HEKA HAFT ADHESIVE elastisch kleefzwachtel

Pleisterzwachtel, korte rek, kern 100% katoen, latexvrij, modelleerbaar, schuifvast. Per stuk verpakt in doosje.
Toepassing: tijdelijke drukverlichting; geeft steun en ontlast bij verstuiking/ontwrichting; sportbandage; compressietherapie.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0741	4,5 m* x 6 cm	1 rol	72 x 1 rol 15456250
latex free	WI0742-1	4,5 m* x 8 cm	1 rol	72 x 1 rol 15366006
	WI0743	4,5 m* x 10 cm	1 rol	36 x 1 rol 15366014

*ongerek 2,5 m

HEKA FAST MULTISTRETCH naadloos buisverband

Elastisch buisverband, 92% viscose/5% elastaan/3% polyamide, latexvrij. Per stuk verpakt in cellofaan.
Toepassing: verbandfixatie; fixatie urinezakken; ter bescherming huid / kleding; geschikt voor Wet-Wrap-techniek.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0901	7,5 cm x 1 m	12 st	17 x 12 st 15605841
	WI0905	7,5 cm x 5 m	6 rol	12 x 6 rol 15392716
	WI0911	10,75 cm x 1 m	12 st	17 x 12 st 15605876
	WI0915	10,75 cm x 5 m	6 rol	8 x 6 rol 15605892

HEKA POR hechtpleister non-woven

De meest huidvriendelijke hechtpleister. Microporeuze, non-woven ruglaag. Dun, flexibel, zacht. Met de hand te scheuren. Zuurstof en waterdamp doorlatend.
Toepassing: bij een tere huid, bij veelvuldig te vervangen verbanden en verbanden in het gelaat. Verkrijgbaar op ring en handzame dispenser.

ref	afmeting	inhoud verp.	Z-index stuk	Z-index verp.	
niet-steriel	PL0027	rol • 9,1 m x 2,5 cm	12 x 1	n.v.t.	15392546
	PL0081	ring • 5 m x 1,25 cm	18 x 1	15605825	15605833
	PL0082	ring • 5 m x 2,5 cm	12 x 1	15482235	15392503
	PL0033	ring • 5 m x 5 cm	12 x 1	15482243	15392511
	PL0035	dispenser • 5 m x 2,5 cm	6 x 1	15392538	15483398

HEKA PADDING

Wattenrol; lagen synthetische vezels, huidvriendelijk, luchtdoorlatend, niet absorberend. Per stuk verpakt in een wikkel.
Toepassing: alle soorten polstering.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WA4026	2,75 m x 6 cm	10 rol	50 x 10 rol 14010550
	WA4028	2,75 m x 8 cm	5 rol	50 x 5 rol 13924109
	WA4031	3 m x 10 cm	5 rol	50 x 5 rol 15356078
	WA4035	2,75 m x 15 cm	5 rol	50 x 5 rol 13924346

HEKA DUR TEX TOTAL basisset voor ambulante compressietherapie

Inhoud
 2 x 2 stuks Heka Dur tex compressiezwachtel • 5 m x 10 cm
 1 x Heka Fast multistretch buisverband • 5 m x 7,5 cm
 1 x Heka Padding synthetische watten • 3 m x 10 cm
 1 x Heka Por non-woven • 5 m x 2,5 cm

ref	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI1100-2	1 box	1 x 1 box 15938662

HEKA IDEEAL stevig rekbaar steunzwachtel

Korte rek, 100% katoen, rafelvrije randen. Per stuk verpakt in cellofaan inclusief verbandklemmen.
Toepassing: geeft steun en ontlast bij verstuiking/ontwrichting; sportbandage; fixatiewindsel.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0080-1	5 m x 4 cm	10 rol	10 x 10 rol 15456064
	WI0082-1	5 m x 6 cm	10 rol	10 x 10 rol 15456072
	WI0084-1	5 m x 8 cm	10 rol	10 x 10 rol 15456080
	WI0086-1	5 m x 10 cm	10 rol	5 x 10 rol 15456099
	WI0088-1	5 m x 12 cm	10 rol	5 x 10 rol 15456102

HEKA DUR FORTE compressiezwachtel, zware uitvoering

Compressiewindsel, lange rek (ca. 175%), hoog elastisch, 93% katoen / 7% polyurethaan, compressie volledig doseerbaar, wasbaar, latexvrij. Per stuk verpakt in doosje inclusief verbandklemmen.
Toepassing: ambulante compressietherapie; volledig doseerbaar; 's nachts verwijderen.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0154-1	7 m x 8 cm	1 rol	64 x 1 rol 14061619
latex free	WI0156-1	7 m x 10 cm	1 rol	32 x 1 rol 14061627
	WI0158-1	7 m x 12 cm	1 rol	32 x 1 rol 14061635

HEKA DUR TEX 100% cotton compressiezwachtel

Compressiezwachtel, korte rek (ca. 80%), 100% katoen, wasbaar op 90 °C, latexvrij. Per twee stuks verpakt in doosje, inclusief verbandklemmen.
Toepassing: ambulante compressietherapie, geeft lage werkdruk / hoge rustdruk; kan 's nachts blijven zitten.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0174-1	5 m x 8 cm	2 rol	32 x 2 rol 15364720
	WI0176-1	5 m x 10 cm	2 rol	32 x 2 rol 15364739

HEKA HAFT ADHESIVE SENSITIVE elastisch kleefzwachtel

Pleisterzwachtel, korte rek, kern 100% katoen, latexvrij, huidvriendelijk door gecoate acryl smeltlaag, modelleerbaar, schuifvast. Per stuk verpakt in doosje.
Toepassing: tijdelijke drukverlichting; geeft steun en ontlast bij verstuiking/ontwrichting; sportbandage; compressietherapie.

ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0752	4,5 m* x 6 cm	1 rol	72 x 1 rol 15364798
latex free	WI0754	4,5 m* x 8 cm	1 rol	72 x 1 rol 15364801
	WI0756	4,5 m* x 10 cm	1 rol	36 x 1 rol 15364828

*ongerek 2,5 m

HEKA GRIP COMPRESS compressief buisverband

Druk- en steungevend buisverband, 83% katoen, 9% elastomeer, 8% polyamide. Buisverband wordt dubbel aangebracht en geeft overal gelijkmatige druk.
Toepassing: bij lichte vormen van oedeem, na gipsbehandeling, bij spataderen en verrekkingen van pezen of banden.


ref	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index stuk
niet-steriel	WI0920	maat C • 1 mtr • 15-24 cm	1 rol	12 x 1 rol 15471594
	WI0921	maat D • 1 mtr • 25-35 cm	1 rol	12 x 1 rol 15471608
	WI0922	maat E • 1 mtr • 36-44,5 cm	1 rol	12 x 1 rol 15471616
	WI0923	maat F • 1 mtr • 45-50 cm	1 rol	12 x 1 rol 15471624

HEKA SILK kunstzijde hechtpleister

De meest krachtige hechtpleister van kunstzijde. Sterke geweven ruglaag en kleefkracht. Zuurstof en waterdamp doorlatend. Goed bestand tegen tractie.
Toepassing: het vasthechten van slangen, sondes, catheters. Immobilisatie van kleine gewrichten. Verkrijgbaar op ring en handzame dispenser.

ref	afmeting	inhoud verp.	Z-index stuk	Z-index verp.	
niet-steriel	PL0072	dispenser • 5 m x 2,5 cm	6 x 1	15392562	15482278
	PL0073	ring • 5 m x 1,25 cm	18 x 1	15605787	15605795
	PL0074	ring • 5 m x 2,5 cm	12 x 1	15605809	15605817

AMBULANTE COMPRESSIETHERAPIE VOLGENS DE CBO-RICHTLIJN methode met korte-rek zwachtels.

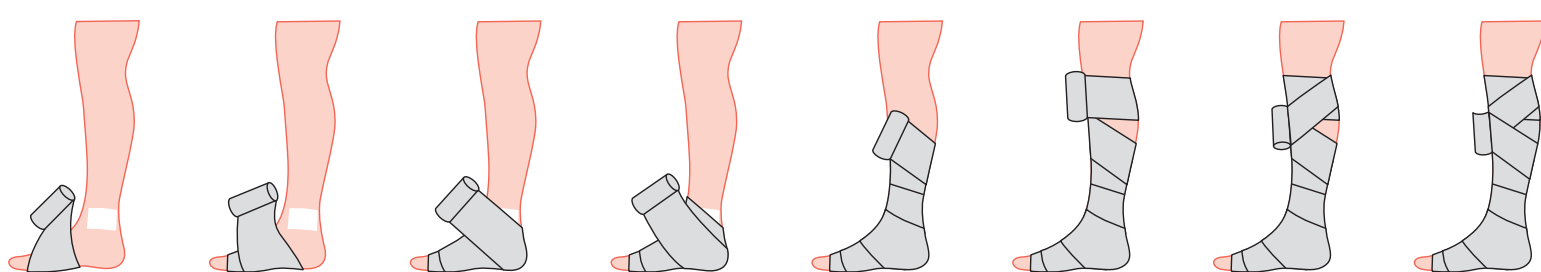

- zwachtel de - zonodig synthetische - watten van tenen tot aan de knieholte, zodat het been rond wordt
- laat de patiënt het enkelgewricht in een stand van 90° plaatsen
- zet het verband met een slag om de voorvoet vast
- maak twee slagen om de rest van de voet
- maak een spiraalwinding over de hiel
- maak een spiraalwinding 1/3 op de hiel en 2/3 erboven

- maak een spiraalwinding 1/3 op de hiel en 2/3 eronder
- maak een circulaire slag rond de enkel
- hang vervolgens de kuit op door naar de knie te gaan
- maak een circulaire slag rond de knie
- ga vervolgens terug naar beneden en volg het verband
- maak het verband vast
- breng het tweede verband op dezelfde wijze aan maar in tegengestelde richting